




# Feet Relaxer

MODELO IM9002

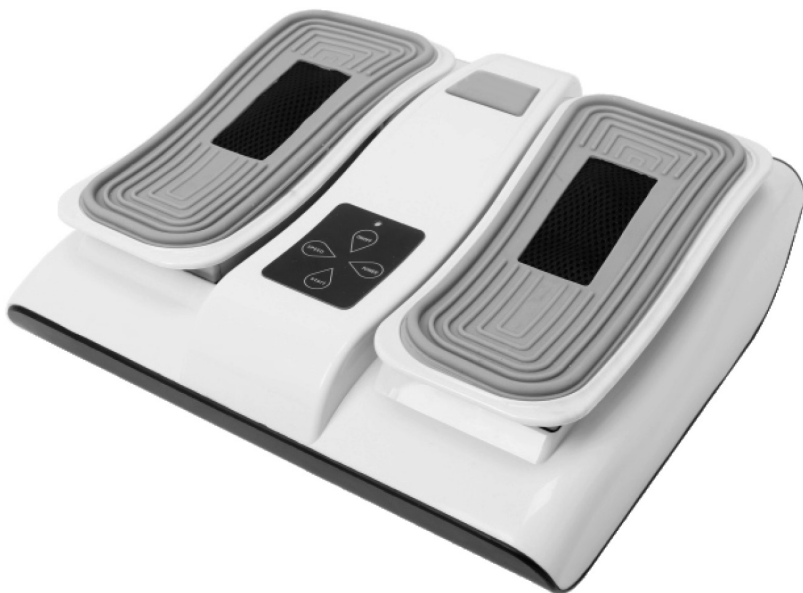

## Manual del propietario

Este manual contiene información importante para el ensamblaje y uso de su nuevo Relajador de pies, así como las recomendaciones y advertencias de seguridad para el usuario.

Este equipo debe ser ensamblado por un adulto, el cual, debe haber leído y entendido todas las instrucciones de este manual.

Mantenga el material de empaque y las bolsas de plástico lejos de los niños y deshágase de ellas antes de ensamblar el equipo. **Conserve este manual para futuras referencias.**

Pais de origen: China


En México importado por: IMPORTACOP S.A. de CV.

Pedro Infante 2580-10, Los Álamos, Culiacán Rosales, Culiacán Sinaloa, C.P. 80100 México

En Argentina importado por: COPPEL S.A.

Santiago del Estero 1571, Tigre (CP 1648), Buenos Aires, Argentina. CUIT: 30-71041150-2

## Especificaciones técnicas

Baterías Control Remoto (incluidas)	2	Tipo AAA 1.5 V $\equiv$ 3Vcc
Adaptador CA/CC 	1	Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 1.0 A Salida: 24 V $\equiv$ 2.5 A

Capacidad máxima de carga: **NUNCA DEBE PARARSE SOBRE ESTE EQUIPO**

Dimensiones del equipo: 38 x 34 x 13.5 cm.

## Información importante de seguridad

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones antes de ensamblar y utilizar este equipo.

1. Antes de usar el Masajeador de pies, asegúrese de que se encuentra en buenas condiciones físicas. Consulte a su médico si tiene alguno de las siguientes condiciones: hipertensión arterial, enfermedad cardíaca, diabetes, arteriosclerosis, trombosis, osteoporosis, uso de marcapasos, áreas de piel inflamadas o con poca o nula sensibilidad o si es una mujer embarazada.
2. **NO** use este equipo como sustituto de la atención médica. Úselo bajo su propio riesgo.
3. El objetivo de este equipo es proporcionar un masaje relajante. **NO** use el Masajeador de pies antes de acostarse, ya que tiene efectos estimulantes y puede retrasar el sueño.
4. **¡ADVERTENCIA!** Para evitar lesiones y daños irreparables, permanezca siempre sentado cuando use este equipo. **NUNCA SE PARE SOBRE ÉL.**
5. No ejerza presión excesiva sobre el Masajeador de pies, hacerlo, podría alentar o detener el motor y causarle daños al equipo.
6. Lea todas las instrucciones de este manual antes de utilizar el Relajador de pies. Siga todas las advertencias e instrucciones antes de su uso.
7. Guarde este manual durante toda la vida útil de su nuevo Relajador de pies.
8. Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas o incendios, desconecte el equipo inmediatamente después de usarlo, antes de limpiarlo o antes de retirar piezas o accesorios.


## Información importante de seguridad

9. **NO** toque el aparato si se ha caído al agua. Desconéctelo de inmediato.
10. El propietario es responsable de garantizar que todos los usuarios de este equipo estén debidamente informados sobre cómo usarlo de manera segura.
11. Es necesario que supervise el uso del Masajeador de pies, cuando sea utilizado por niños, personas con alguna discapacidad mental o física o que sufran alguna dolencia que limite su capacidad para operar el control.
12. El Masajeador de pies está destinado solo para uso doméstico, en interiores y con buena oxigenación. Manténgalo alejado de la humedad y el polvo.
13. Use el Relajador de pies en una superficie plana y sólida, en un espacio lo suficientemente grande como para permitir un uso seguro del equipo.
14. Use el Masajeador de pies solo de la manera como se describe en este manual. **NO** utilice accesorios que no vengan provistos con este equipo.
15. **NO** transporte este equipo por el cable de corriente, ni lo use como asa.
16. Para evitar sobrecalentamiento, mantenga los orificios del equipo, libres de: objetos, pelusas, cabellos o similares.
17. **NUNCA** cubra el Masajeador de pies cuando esté en funcionamiento.
18. **NO** use este equipo por más de 15 minutos seguidos, sobrepasar ese tiempo, puede provocar sobrecalentamiento y acortar la vida útil de su equipo. Si esto pasa, interrumpa el uso y permita que el equipo se enfríe antes de usarlo de nuevo. El Masajeador de pies puede apagarse automáticamente después de un período prolongado de uso.

# Lista de partes



## Control

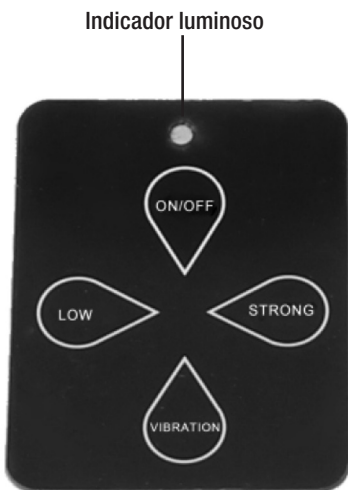

## Control Remoto



## Instrucciones de uso

### Control remoto:

- **ON/OFF:** Enciende y apaga el masajeador de pies.
- **LOW:** Vibración y movimiento de Shiatsu en intensidad baja.
- **STRONG:** Vibración y movimiento de Shiatsu en intensidad alta.
- **VIBRATION:** Presione una vez y el soporte de pies vibratorio trabajará en intensidad baja, presione nuevamente y el soporte de pies vibratorio en intensidad alta.

### Control Remoto:

- Modo vibrador y Shiatsu: Presione una vez y funcionará igual que el botón “LOW” en el control del equipo. Presione nuevamente y funcionará igual que el botón “STRONG” en el control del equipo.
- Modo vibrador: Funciona igual con el botón de “VIBRATION” en el control del equipo.
- **ON/OFF:** Enciende y apaga el masajeador de pies.

## Mantenimiento

### Almacenamiento:

- Cuando no utilice el masajeador de pies, coloque el equipo en su caja o en un lugar seco y fresco.
- Evite el contacto del equipo con bordes afilados u objetos puntiagudos.
- Para evitar que el cable de corriente se dañe, evite enrollarlo alrededor del equipo y NO cuelgue el masajeador de pies del cable de alimentación.

### Limpieza:

- Desconecte el Masajeador de pies y deje que se enfríe antes de limpiarlo.
- Limpie solo con un paño suave y ligeramente húmedo.
- **NUNCA** permita que el agua u otros líquidos entren en contacto con su equipo. **NO** sumerja el equipo en ningún líquido para limpiar.
- Nunca use limpiadores abrasivos, cepillos o productos químicos fuertes que puedan o no ser inflamables y dañen el producto.
- **NO** intente reparar el Masajeador de pies. Póngase en contacto con su distribuidor si detecta algún mal funcionamiento del equipo.

## **Instalación / reemplazo de las baterías control remoto**

1. Para instalar las baterías en el control remoto, primero abra la tapa del control, posteriormente inserte las baterías en el compartimiento localizado en la parte de atrás del control remoto. Cuide que las baterías se conecte con la polaridad correcta (positivo y negativo). Después coloque nuevamente la tapa del control.
1. El control remoto usa dos baterías AAA (incluidas).
2. Al finalizar, coloque la tapa del control remoto nuevamente en su lugar.

## **Cuidado de las baterías**

1. Las baterías que no son recargables, no deben intentar cargarse.
2. Si usa baterías recargables, deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
3. No mezcle baterías viejas con baterías nuevas. No mezcle diferentes tipos de baterías.
4. Inserte las baterías como está indicado dentro del compartimiento de las mismas.
5. Siempre remueva las baterías agotadas del equipo, para evitar que se derramen. Si la batería se derramó, evite tocar directamente la batería o las terminales y lávese las manos abundantemente después de retirarla del equipo. El dióxido o hidróxido producido por el derramamiento, puede ser tóxico para la salud.
6. Nunca haga corto circuito con las terminales de la batería.

**“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones”**

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

# Notas

